

DENTES DE POLÍMERO SINTÉTICO PARA PRÓTESES DENTÁRIAS

Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual. Para melhor adesão dos dentes ao polímero da base da prótese, tirar o brilho da base do dente com uma ferramenta abrasiva. Após isolamento da mufla e antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com monômero de metilmetacrilato.

Recomendações ao paciente: Para aumentar a durabilidade dos dentes é recomendada uma higienização diária sem uso de substâncias agressivas como ácidos ou álcalis.

Composição: Polimetilmetacrilato - Dimetacrilato - Fluorescente - Pigmentos Biocompatíveis.

Armazenagem: Conservar ao abrigo de luz e calor.

Embalagem: 14 Placas anteriores ou 10 Placas posteriores.

SYNTHETIC POLYMER TEETH FOR DENTAL PROSTHESIS

Follow the usual procedures for choice, waxing-up, articulation, polymerization, infection-control and maintenance of the prosthesis, as well as for individual protection. For an optimized bonding to the denture base resin, grind the tooth base with a grinding instrument. After insulating the flask and prior to pack the acrylic dough, clean the base surface of the tooth using methylmethacrylate monomer.

Indications for the patient: To increase the teeth durability it is highly recommended to avoid contact with alkalis, acids or other substances that can damage acrylic materials during the daily hygiene.

Composition: Polymethylmethacrylate - Dimethacrylate - Fluorescent - Biocompatible Pigments.

Storage: Keep protected from light and heat.

Packing Units: 14 anterior sets or 10 posterior sets.

DIENTES DE POLÍMERO SINTÉTICO PARA PRÓTESIS DENTALES

Seguir los procedimientos usuales para selección, montaje, articulación, polimerización, control microbiológico y mantenimiento de la prótesis, tanto como para protección individual. Para mejorar la adhesión de los dientes a la base de la prótesis se debe eliminar el brillo de la base del diente con una herramienta abrasiva. Después de aislar la mufla y antes de aplicar la resina, limpiar la base de los dientes con monómero de metilmetacrilato.

Recomendaciones al paciente: Para aumentar la duración de los dientes es recomendada una higienización diaria sin usar sustancias agresivas como ácidos o álcalis.

Composición: Polimetilmetacrilato - Dimetacrilato - Fluorescente - Pigmentos Biocompatibles. Almacenamiento: Conservar protegido de luz y calor.

Embalaje: 14 placas anteriores o 10 placas posteriores.

RESPONSÁVEL TÉCNICO : LUIZ PAULO RIBEIRO JUNIOR CRQ IV - 03251745
CADASTRO ANVISA Nº 10216040027



VIPI Indústria, Comércio, Exportação e Importação
de Produtos Odontológicos Ltda.
Rua Carlos Tassoni, 4521 - Distrito Industrial - Caixa Postal 48
CEP 13633-418 - Pirassununga - São Paulo - Brasil
Fone: +55 (11) 3046 2222
C.N.P.J.(MF) 49.425.259/0001-73
Indústria Brasileira - Made in Brazil - Hecho en Brasil

NEW DENT

Comply / Cumple / Cumpre ISO 22112

Catálogo de formas
Mould chart
Carta de formas

Dentes Acrílicos
Acrylic Teeth
Dientes Acrílicos

Dupla ligação cruzada
Fluorescentes

Double crosslinked
Fluorescent

Doble cadena cruzada
Fluorescentes

1100-PIR-ARTE 0344 - 12092 - Rev.03


Fotos: Eduardo Miura




0800-7712226
www.vipi.com.br



Anteriores Superiores - Upper Anteriors

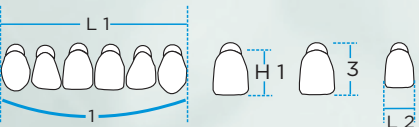

Anteriores Inferiores - Lower Anteriors

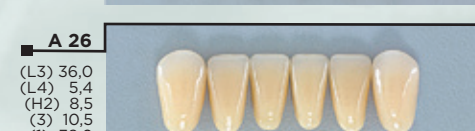

Posteriores Superiores e Inferiores - Upper and Lower Posteriors

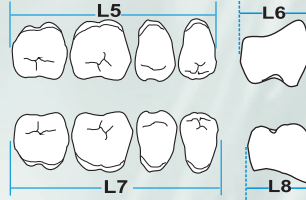


TABELA DE ARTICULAÇÃO
ARTICULATION CHART

Anteriores Superiores Upper Anteriors	Anteriores Inferiores Lower Anteriors	Posteriores Superiores e Inferiores Upper and Lower Posteriors
3M	2D	30M
2D	2D	30L/30M
3N	3N	30L/32M
3P	3P	32L/32M
A25	A25	30M/32M
2N	2N	30L
A26	A26	32M
263	2N	30L/30M
264	3N	32L/32M
266	266	34L
38	266	34L

ESCALA DE CORES - SHADE GUIDE

GUÍA DE COLORES

60 - 62 - 66 - 67 - 69

NEW
DENT